

DELUXE MASSAGE CHAIR

Pred použitím si dôkladne prečítajte celý manuál a bezpečnostné pokyny.


POZOR!!! - ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA PRE KRESLO DAMICO SENTO

Pri nastupovaní a vystupovaní do a z kresla si dávajte pozor, aby ste nestlačili tlačidlo, čo zapína kreslo a nepoškodili diaľkové ovládanie. Nikdy nenastupujte a nevystupujte z kresla, ktoré je v pohybe a ani vtedy, keď kreslo nie je v základnej sedacej polohe s nohami na zemi!

Po nastúpení do kresla a zapnutí prebieha sken postavy, dôkladne sa oprite hlavou aj chrbtom k opierke a nehýbte sa, inak Vás kreslo zle zameria.

Kreslo môže používať iba 1 osoba
Zákaz používania deťom do 15 rokov bez dozoru.
V prítomnosti detí kreslo vypnite hlavným vypínačom.

Damico Sento

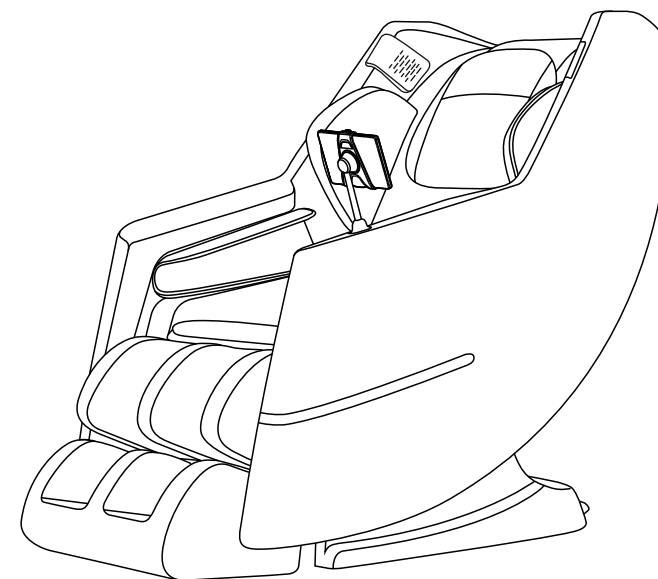

Pred použitím si dôkladne prečítajte celý manuál a bezpečnostné pokyny.

Prajeme vám veľa relaxu, pohody a zdravia.

Ďakujeme za zakúpenie produktu. Prosím pozorne si prečítajte návod, aby ste vedeli narábať s kreslom správne pred jeho použitím. Prosím venujte viac pozornosti dôležitým bezpečnostným upozorneniam a riadne si uschovajte tento návod pre budúce použitie. Poznámka: Naša spoločnosť si vyhradzuje právo revidovať nákres a popis produktu bez hociakých ďalších upozornení. Vztahuje sa na prevedenie produktu.

Ďakujeme za zakúpenie produktu. Prosím pozorne si prečítajte návod, aby ste vedeli narábať s kreslom správne pred jeho použitím. Prosím venujte viac pozornosti dôležitým bezpečnostným upozorneniam a riadne si uschovajte tento návod pre budúce použitie. Poznámka: Naša spoločnosť si vyhradzuje právo revidovať nákres a popis produktu bez hociakých ďalších upozornení. Vztahuje sa na prevedenie produktu.

Obsah

Bezpečnosť

Vonkajšie komponenty

Inštalácia a pohyb

Inštrukcie na použitie

Menu ovládania

Čistenie a údržba

Riešenie problémov

Špecifikácia



damico

Bezpečnosť a údržba

1. Dôležité bezpečnostné upozornenie .



- Zabráňte deťom dotýkať sa pohyblivých častí a manipulácii s výrobkom bez dozoru
- Použite bezpečný uzemnený prívod elektrického napätia
- Odpojte napájanie ak produkt nepoužívate alebo ak sa chystáte kreslo čistiť aby ste predišli zraneniam a poškodeniu výrobku.
- Používajte kreslo vždy v súlade s týmto manuálom a inštrukciami.
- Nepoužívajte žiadne iné príslušenstvo, ktoré nie je dodávané alebo odporúčané výrobcom.
- Zákaz používania vo vonkajšom a vlhkom prostredí.
- Pred prvým použitím si dôkladne prečítajte tento manuál a inštrukcie.
- Iné využitie ako je uvedené v tomto manuále je zakázané.
- Denný odporúčaný čas využitia 1 osobou je 20 minút.
- Kreslo nepoužívajte ak je akákoľvek textília alebo ekokoža poškodená.
- Kreslo nepoužívajte ak je poškodený vankúš alebo chrbtová časť s vyhrívaním.
- Pri používaní nezakrývajte zadnú časť s odvetrávaním ani žiadnu pohyblivú časť kresla.
- Zamedzte vrhodenu alebo vpadnutiu akýchkoľvek predmetov do vnútra kresla.
- Pri používaní produktu nikdy nespíte a ani nezaspávajte.
- Nepoužívajte výrobok pod vplyvom alkoholu a pri akejkoľvek nevoľnosti.
- Kreslo používajte najskôr hodinu po jedle.
- Zvoľte si len taký masážny program a polohu, ktorá zamedzí vzniknutiu zranení.
- **Je zakázané používať kreslo viac ako jednou osobou súčasne.**
- **Je zakázané používať kreslo osobou s vyššou hmotnosťou ako je maximálne prípustná.**
- **Je zakázané používať kreslo osobou, ktorá ma širšiu postavu ako je vnútorný priestor kresla.**
- **Počas masáže zložte všetky šperky, hodinky a pevné/ostre časti odevu, ktoré môžu kreslo poškodiť.**

2. Prostredie na používanie.

- Nepoužívajte kreslo pri vysokých teplotách a ani v priestoroch so zvýšenou vlhkosťou, ako napríklad v kúpeľni a podobne.
- Nepoužívajte v priestoroch kde dochádza k prudkým výkyvom teploty a vlhkosti, ako napríklad zimná záhrada, pivničné priestory a podobne.
- Nepoužívajte produkt v prašnom a znečistenom prostredí, ani pri veľkej žiare ako krb a pod.
- Kreslo používajte len v dostatočnom priestore s dobrou ventiláciou vzduchu.

3. Ľudia, ktorí nie sú vhodný na používanie tohto produktu.

- Ľudia trpiaci osteoporózou nie sú vhodný na používanie produktu.
- Ľudia trpiaci srdcovými poruchami alebo nosia elektronické lekárske zariadenie ako napríklad srdcový kardiostimulátor nie sú vhodný na používanie produktu
- Ľudia so zvýšenou teplotou (horúčkou) nie sú vhodný na používanie produktu.
- Tehotné ženy alebo ženy, ktoré majú práve menštruáciu nie sú vhodné na používanie tohto produktu.
- Zranené osoby a ľudia s kožnými ochoreniami nie sú vhodný na používanie kresla.
- Deťom mladším ako 14 rokov alebo ľuďom s mentálnym postihnutím bez dozoru nie je umožnené používať produkt.
- Ľuďom, ktorým bolo povedané doktorom , že majú odpočívať alebo ľudia čo sa cítia chorí nie sú vhodní na používanie produktu.
- S mokrym telom je vstup na produkt zakázaný.

Bezpečnosť a údržba

4. Bezpečnosť.

- Preverte či napätie vyhovuje špecifikácii tohto produktu.
- Nezapájajte produkt mokrymi rukami.
- Voda ani iná tekutina sa nesmie dostať do vnútra produktu aby sa zabránilo úrazu elektrickým prúdom a poškodeniu zariadenia.
- Nepoškodte elektrické káble a vodiče, nemeňte obvody tohto produktu.
- Nepoužívajte mokrú látku na čistenie elektrických častí (prepínač, zásuvka).
- Budte mimo produktu v prípade výpadku elektrického prúdu, vyvarujete sa zraneniu ak prúd znova naskočí.
- Prestaňte používať produkt ak sa správa neprirodzene a okamžite kontaktujte svojho predajcu.
- Prestaňte používať produkt ak cítite nevoľnosť a konzultujte zdravotný stav s lekárom.
- Produkt nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženou fyzickou, vnemovou, mentálnou kapacitou alebo s nedostatkom skúseností a poznatkov, pokiaľ nemajú dozor alebo inštrukcie týkajúce sa používania produktu od zodpovednej osoby pre ich bezpečie pre bezpečnú obsluhu zariadenia.
- Deti do 15r by mali byť vždy pod dozorom, ktorý zaistí aby sa nehrali a nezranili používaním produktu.
- Ak sú káble vodičov poškodené, musí byť produkt vrátený na miesto výroby, je to servisná služba, ktorú vykoná kvalifikovaná osoba, aby ste sa vyhli nebezpečiu.

5. Údržba.

- Technická údržba produktu by mala byť vykonaná školenou, alebo predajcom poučenou osobou, používateľa majú zakázané rozoberať a spravovať produkt.
- Nezabudnite odpojiť zo zásuvky po používaní.
- Nepoužívajte produkt ak je poškodená zásuvka.
- Ak produkt nebude dlho používaný, prosím zabezpečte kabeláž a udržiavajte produkt v suchom a bezprašnom prostredí pri teplote minimálne 10°.
- Nenechávajte produkt pod veľkou teplotou, blízko ohňa a vyhnite sa dlhodobému slnečnému žiareniu.
- Poškodené káble musia byť počas záručnej doby nahradené výrobcom (servisným technikom alebo kvalifikovanou poverenou osobou) . Vyhnite sa nebezpečenstvu.
- Produkt čistíte suchou handričkou. Nepoužívajte žiadne čističe (benzín, alkohol...)
- Mechanické súčiastky tohto produktu sú špeciálne navrhnuté a zostrojené, **nemeňte ich za iné.**
- Nepoužívajte predmety s ostrými hranami pri manipulácii s kreslom.
- Netlačte kreslo po nerovnom povrchu, produkt by mal byť nadvihnutý pred sťahovaním a posúvaním
- **Kreslo používajte striedavo, nepoužívajte nepretržite po dlhú dobu.**


6. Riešenie bežných porúch a problémov.

- Je prirodzené, že produkt vydáva pohybujúce sa zvuky pri používaní.
- Ak ovládač nepracuje správne, skontrolujte zástrčku a zásuvku či sú pevne pripojené a presvedčte sa že je prepínač zapnut v polohe 1 (on).
- Ak produkt dopracuje, automaticky sa vypne; ak produkt pracuje nepretržite po dlhú dobu, teplotná ochrana dá produkt automaticky do vypnutého režimu a kreslo by malo byť použiteľné opäť za 30minút.

Bezpečnostné upozornenia


! Pozor

Pri pohybe kresla a časti na nohy nikdy netlačte v protismere pohybu, zabránite tým poškodeniu a zraneniam. Nezaťažujte tieto časti inak ako polohou pri masírovaní.

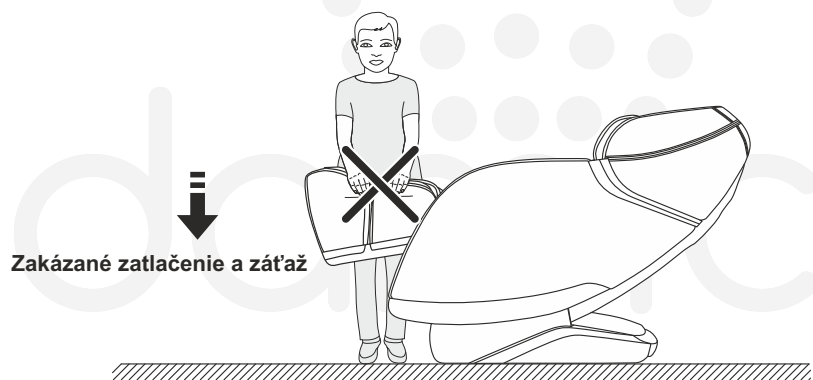

! Pozor


Pri sadaní do kresla sa uistite, že masážne hlavice sú odstavené v počiatočnej polohe, zabránite tým zraneniam a aj možnému poškodeniu masážneho kresla.

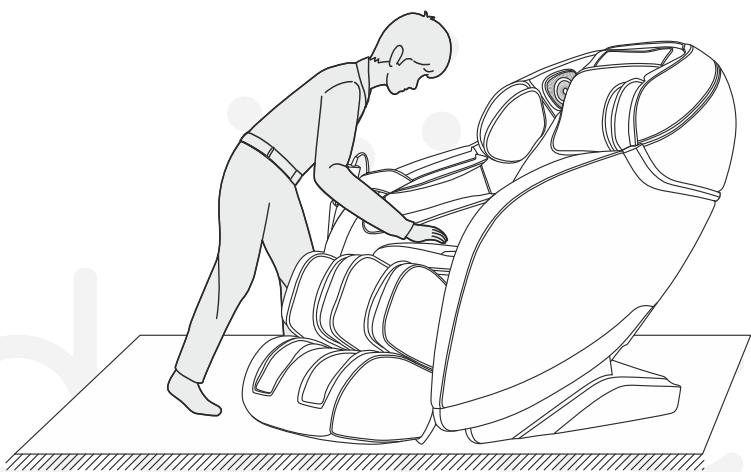

Bezpečnostné upozornenia


! Pozor

Počas pohotovostného režimu a zapínania sa nesnažte vytiahnuť ovládací alebo napájací kábel, aby nedošlo k poškodeniu produktu alebo úrazu elektrickým prúdom. Odporúčame odpojiť kábel ovládača a napájací kábel a odložiť vždy po použití kresla.

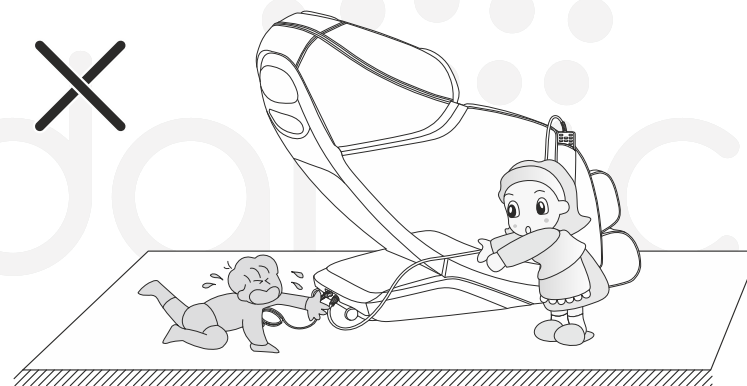

! Pozor


Pri spustení funkcie ležania s nulovou gravitáciou nezabudnite skontrolovať, či sa nenachádzajú deti a domáce zvieratá pod spodnou časťou opierky pre nohy a v časti operadla, môžu spôsobiť poškodenie produktu alebo zranenie osôb.

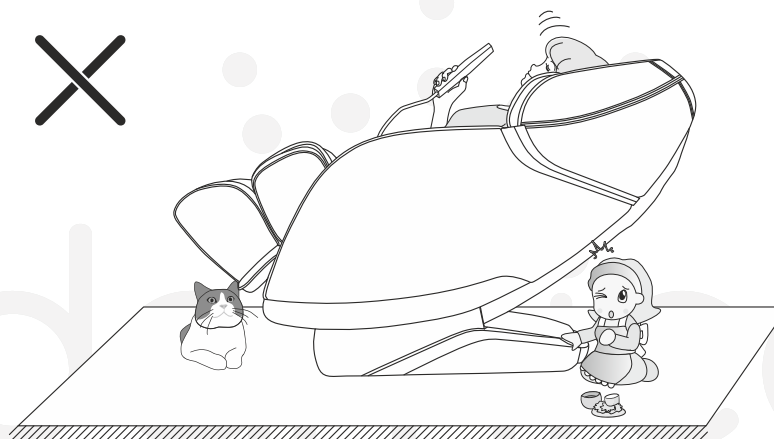

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Zariadenie zapájajte iba do riadne uzemnenej zásuvky
Na pripojenie do siete používajte iba kábel s uzemnením
Nikdy neupravujte ani neopravujte napájací kábel
Používajte iba originál dodávaný napájací kábel

Postup správneho zapojenia zariadenia:

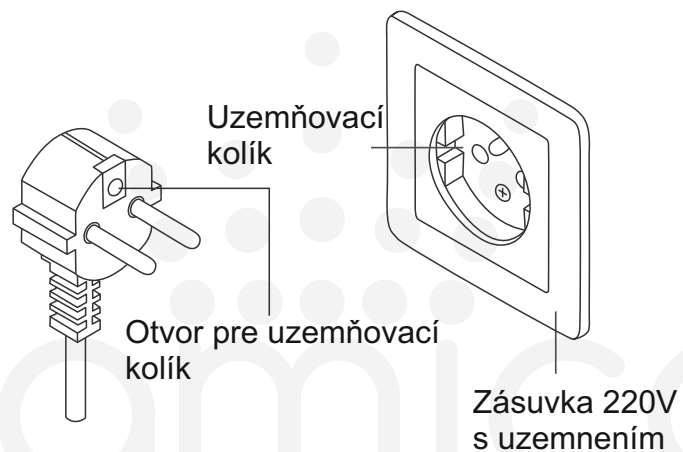


Komponenty:

VONKAJŠIE ČASTI

Vankúš na hlavu

Chrbtová opierka


Vankúše na nohy

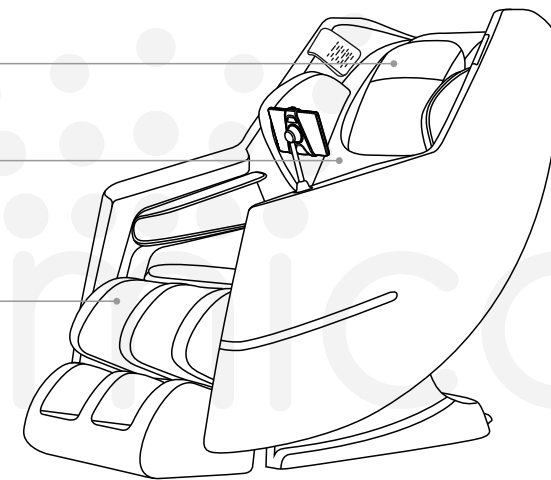

Vankúše na ramená


Bočnica kresla

Kryt kresla

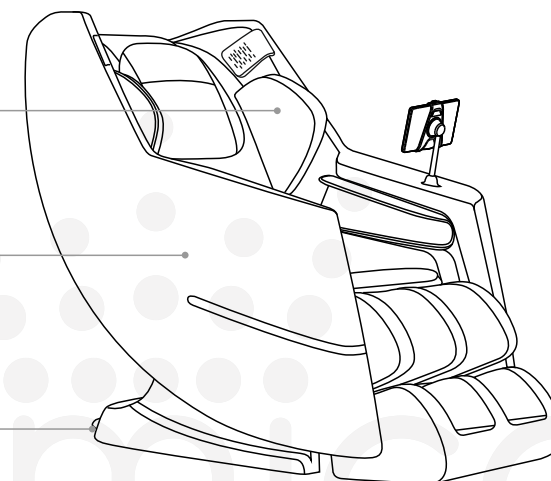

Komponenty:

Ovládania (špecifikácia podľa verzie)

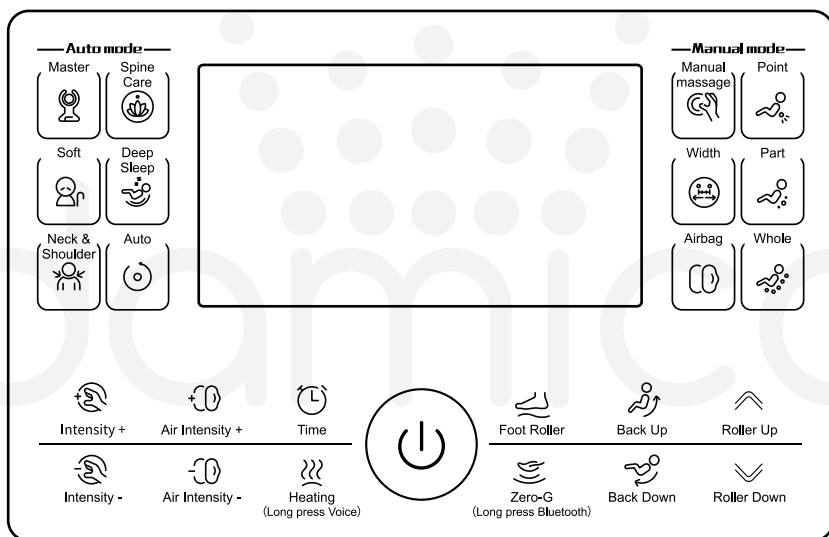

⚠ UPOZORNENIE DOTYKOVÝ DISPLEJ

- Nesadajte si na ovládanie, ani ho nezaťažujte ťažkými predmetmi.
- Zamedzte pádom a nárazom diaľkového ovládania.
- Nepoužívajte a nestláčajte ovládanie veľkou nadmernou silou.
- Chráňte ovládanie pred vodou a inými tekutinami
- Nepoužívajte ovládanie s mokrými a vlhkými rukami.
- Nepoužívajte na stláčanie ovládania ostré a tvrdé predmety.


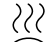






Komponenty:

Tlačidlá ovládania

Funkcia	Ikona	Popis
Napájanie		Dlhšie podržte pre zapnutie/vypnutie masážneho kresla, krátko stlačte pre zastavenie/spustenie programu.
Master		Stlačte pre spustenie programu Master - hlavný.
Spine Care		Stlačte pre spustenie programu Spine Care - starostlivosť.
Soft		Stlačte pre spustenie programu Soft - jemný.
Deep Sleep		Stlačte pre spustenie programu Deep Sleep - pre spánok.
Neck & Shoulder		Stlačte pre spustenie programu Neck & Shoulder - krk a ramená.
Auto programy		Stlačte pre voľbu viacerých automatických programov.
Manuálny režim		Stlačte pre voľbu manuálneho nastavenia masáže, zvolte si techniku, miesto a intenzitu podľa požiadaviek.
Bod		Fixná masáž v jednom bode, stlačte šípky alebo pre voľbu polohy masážnych hlavíc.
Úsek		Masáž v úseku, stlačte šípky alebo pre voľbu umiestnenia pohybu masážnych hlavíc.
Celok		Masáž po celom rozsahu pohybu masážnych hlavíc.
Šírka		Zmena šírky rozostúpenia hlavíc (mód Knocking/Tapping/Shiatsu). Displej zobrazí: široko, stredne, blízko.
Intenzita +		Stlačte pre zmenu intenzity pohybu masážnych hlavíc.
Intenzita -		Stlačte pre zmenu intenzity pohybu masážnych hlavíc.
Vzduchové vankúše		Stlačte pre úplné zapnutie/vypnutie masážnych vankúšov, alebo pre zmenu zapnutých pozícií vankúšov na kresle.
Tlak +		Stlačte pre zmenu tlaku masážnych vankúšov.
Tlak -		Stlačte pre zmenu tlaku masážnych vankúšov.


Komponenty:

Tlačidlá dotykového ovládania

Funkcia	Ikona	Popis
Time - čas		Stlačte pre zmenu dĺžky masážneho programu. Intervaly 10/15/20/25/30 minút.
Vyhrievanie (podržte pre hlasové ovládanie v EN jazyku)		Stlačte pre zapnutie/vypnutie ohrievanie. Pridržte pre zapnutie/vypnutie hlasového EN ovládania.
Valčeky		Stlačte pre zapnutie/vypnutie masážnych valčekov a pre zmenu intenzity pohybu v stupňoch od 1 po 3.
Poloha beztiaže (podržte pre funkciu bluetooth)		Stlačte pre zmenu polohy beztiaže - 3 predvolené úrovne. Pridržte pre zapnutie/vypnutie bluetooth pripojenia.
Zdvíhanie hore		Pridržte pre zmenu polohy kresla. Chrbát ide smerom hore a nohy smerom dole, pusťte pri dosiahnutí požadovanej polohy.
Polohovanie dole		Pridržte pre zmenu polohy kresla. Chrbát ide smerom dole a nohy smerom hore, pusťte pri dosiahnutí požadovanej polohy.
Hlavice hore		Po naskenovaní postavy môžete šípkami upraviť hornú načítanú pozíciu ramien. V manuálnom móde tlačidlami posúvate polohu masážnych hlavíc pridržením tlačidiel hore/dole.
Hlavice dole		


Bluetooth spárovanie:



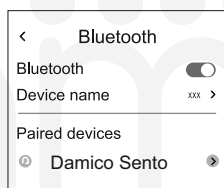






- vyberte na svojom zariadení na spárovanie „ Damico Sento “ pre prepojenie zvuku so vstavanými reproduktormi

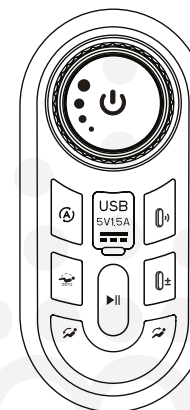

Komponenty:

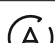Tlačidlá vstavaného ovládania

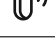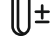

Funkcia	Ikona	Popis
Napájanie		Stlačte pre zapnutie/vypnutie masážneho kresla.
Polohovanie		Otáčaním meníte polohu kresla, celkove je k dispozícii úroveň 1-6.
Auto programy		Stlačte pre voľbu medzi viacerými automatickými programami.
Pauza		Stlačte pre zastavenie/spustenie masážnych funkcií.
Vzduchové vankúše		Stlačte pre úplné zapnutie/vypnutie masážnych vankúšov, alebo pre zmenu zapnutých pozícií vankúšov na kresle.
Tlak vankúšov		Stlačte pre zmenu tlaku masážnych vankúšov. Vyberte si úroveň 1-3.
Poloha Zero G beztiaže		Stlačte pre zmenu polohy beztiaže - 3 predvolené polohy kresla.
Zdvíhanie hore		Pridržte pre zmenu polohy kresla. Chrbát ide smerom hore a nohy smerom dole, pusťte pri dosiahnutí požadovanej polohy.
Polohovanie dole		Pridržte pre zmenu polohy kresla. Chrbát ide smerom dole a nohy smerom hore, pusťte pri dosiahnutí požadovanej polohy.
Konektor nabíjania	USB	Konektor USB na nabíjanie pomocou kábla (nie je dodávaný).


Programy:

Automatické masážne programy:

Master	MASTER - hlavný program. Celotelová masáž, intenzita hlavíc a vzduchových vankúšov je vysoká.
Spine Care	Starostlivosť o chrbticu - využíva akupresúrne a prtláčacie techniky, zameranie je hlavne po stranách chrbtice pre zníženie bolesti a zvýšenie mikrocirkulácie
Soft	Jemný - vhodný hlavne pre staršie osoby a ľudí čo preferujú jemnú masáž. Masážne hlavice používajú mierne techniky a tlak vankúšov je taktiež na nižšej úrovni.
Deep Sleep	Hlboký spánok - celotelová masáž, kreslo pohupovaním mení polohu, intenzita je nízka.
Neck & Shoulder	Krk a ramená - masáž zameraná hlavne na vrchné partie, hlavice používajú techniky na uvoľnenie stuhnutých svalov.
Slim	Štíhla línia - masáž zameraná hlavne na boky a sedacie svaly, jemná intenzita.
Refreshing	Povzbudzujúci - mierna intenzita masáže na chrbát skombinovaná s celotelovou vzduchovou masážou vhodná na prebudenie tela počas dňa.
Relaxing	Relaxačný - celotelová masáž, stredná intenzita valčekov a vzduchových vankúšov.
Spa	Spa - kúpeľná masáž využíva vzduchové vankúše a valčeky na chodidlá.
Sport Care	Pre športovcov - celotelová masáž, program nastavený špecificky pre pohybovo aktívnych ľudí.
Deep Stretch	Strečing - naťahovací program, celotelová masáž na uvoľnenie od bolesti po športovom výkone alebo namáhavej činnosti.
Waist & Back0	Pás a kríže - masáž zameraná hlavne na spodné partie, hlavice používajú techniky na uvoľnenie stuhnutých svalov.

Komponenty:

Obrazovka ovládania (záleží od aktuálnej modelovej verzie)

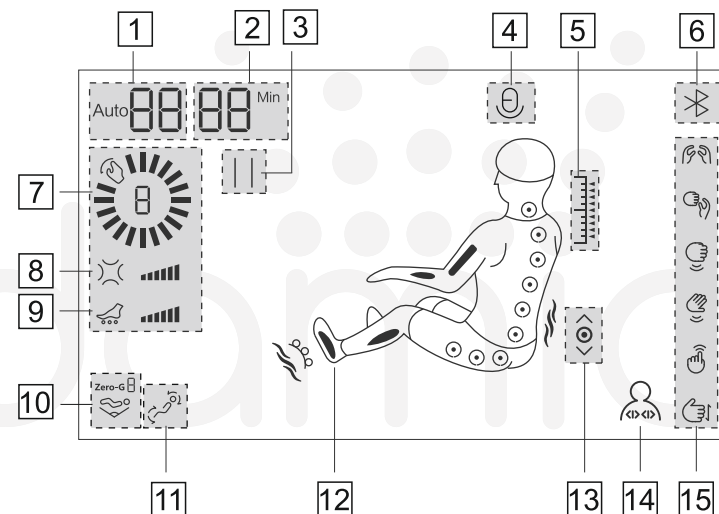

- 1** Zobrazenie Auto/Manual programu
- 2** Čas
- 3** Pozastavenie
- 4** Hlasové ovládanie EN
- 5** Detekcia postavy: zodpovedajúca zóna svieti
- 6** Bluetooth reproduktor
- 7** Rýchlosť pohybu hlavíc
- 8** Tlak vankúšov
- 9** Rýchlosť otáčania valčekov
- 10** Zobrazenie polohy beztiaže
- 11** Polohovanie hore/dole
- 12** Vyhrievanie: svieti ak je aktívne Vankúše: svietia a zobrazuje aktívne zóny
Valčeky: svieti ak sú aktívne Masážne hlavice: zobrazuje aktuálnu polohu
- 13** Zobrazenie masírovanej plochy: celé telo úsek bod (pre manuálny režim)
- 14** Šírka polohy hlavíc: široko stredne blízko
- 15** Zobrazenie masážnej techniky: od vrchu: Miesenie - Tlieskanie - Klepanie - Poklepávanie - Shiatsu - Rolovanie. Aktuálna technika svieti.

Hlasové ovládanie iba v EN jazyku:

Popis voľby Hlasový povel Odpoveď na prijatie povelu

Upozornenie:

- ak chcete používať hlasové ovládanie v EN jazyku tak najskôr povedzte „Hello massage chair“ pre aktiváciu kresla a po obdržaní odpovede „Hello Master“ môžete zadať požadovaný hlasový povel pre spustenie funkcie alebo nastavenia.

Command Words	Response by Chair
Hello massage chair	Hello
Power on	Please select your favorite program to start your massage.
Power off	During shutdown, please leave or restart the massage chair after the chair is completely reset. Thank you and hope you enjoy the massage.
Pause massage	Massage paused
Continue to massage	Massage resumed
Turn on heating	OK, Heating on
Turn off Heating	OK, Heating off
Turn on Bluetooth	OK, Bluetooth on
Turn off Bluetooth	OK, Bluetooth off
Massage for ten minutes	OK, Massage for ten minutes
Massage for fifteen minutes	OK, Massage for fifteen minutes
Massage for twenty minutes	OK, Massage for twenty minutes
Massage for twenty five minutes	OK, Massage for twenty five minutes
Massage for thirty minutes	OK, Massage for thirty minutes
Zero gravity	OK, Zero gravity
Turn on foot roller	OK, Foot roller on
Turn off foot roller	OK, Foot roller off
Start airbag massage	OK, Start airbag massage
Stop airbag massage	OK, Stop airbag massage

Hlasové ovládanie iba v EN jazyku:


Popis voľby Hlasový povel Odpoveď na prijatie povelu

Stop airbag massage	OK, Stop airbag massage
Increase air intensity	Air intensity up
Decrease air intensity	Air intensity down
Increase strength	Increase back roller intensity
Decrease strength	Decrease back roller intensity
spot massage	OK, spot massage
local massage	OK, local massage
whole body massage	OK, whole body massage
Kneading massage	OK, kneading massage
Tapping massage	OK, tapping massage
Shiatsu massage	OK, shiatsu massage
Knocking massage	OK, knocking massage
Clapping massage	OK, clapping massage
Rolling massage	OK, rolling massage
Master massage	Master massage
Spine Care massage	Spine Care massage
Soft massage	Soft massage
Deep Sleep massage	Deep Sleep massage
Neck and shoulder massage	Neck and shoulder massage
Slim massage	Slim massage
Refreshing massage	Refreshing massage
Relaxing massage	Relaxing massage
Spa massage	Spa massage
Sport Care massage	Sport Care massage
Deep Stretch massage	Deep Stretch massage
Waist & Back massage	Waist & Back massage

Príprava pred použitím


Presúvanie kresla:

- vypnite hlavný vypínač a odpojte napájací kábel
- pomocou min. 2 osôb nakloňte kreslo na zadné kolieska (ako na obr.)
- pri posúvaní chráňte podlahu aby sa nepoškodila

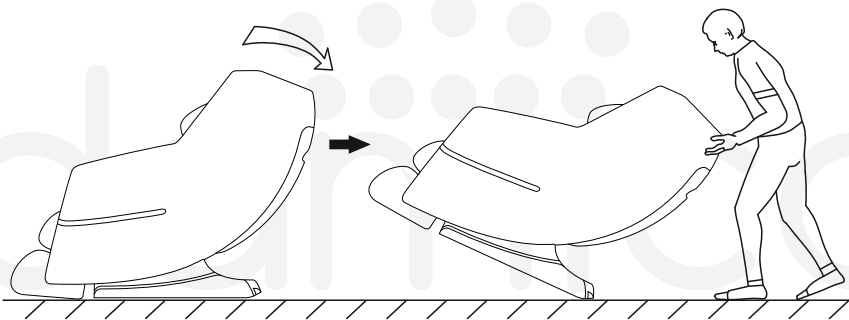

Umiestnenie kresla:


Uistite sa prosím, že minimálny priestor za kreslom je 25 cm (odporúčame 30cm) a pred kreslom je voľný priestor minimálne 40 cm kvôli vysúvaniu časti na nohy.

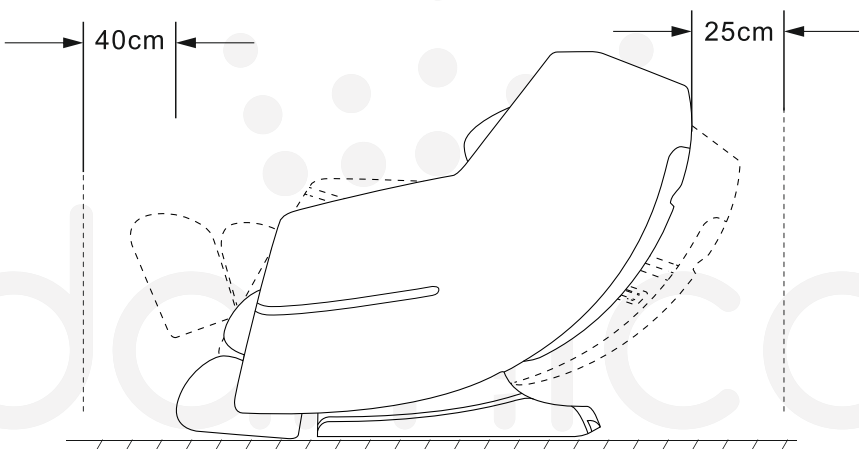


Príprava pred použitím

Inštalácia chrbtovej opierky a vankúša:

- spojte chrbtovú opierku so zipsom na vrchu kresla
- spojte vankúš pomocou suchého zipsu s opierkou


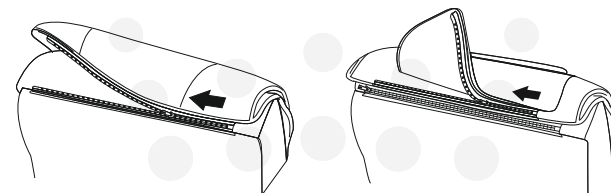


- spojte chrbtovú opierku pomocou zipsov po oboch stranách kresla

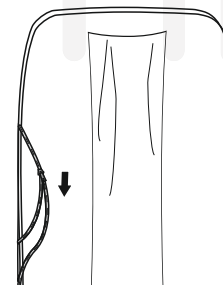


Inštalácia držiaku ovládania:

- napasujte podľa otvoru a otáčaním prichyťte
- napevno zatiahnite držiak

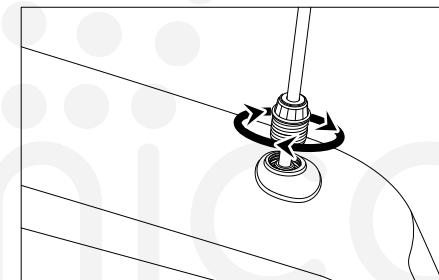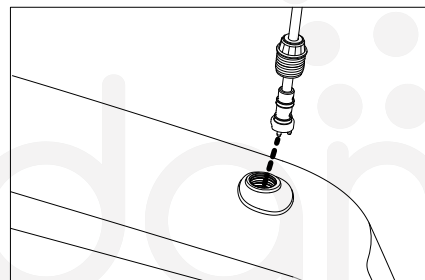


Pripojenie diaľkového ovládania:

- spojte kábel od ovládania s koncovkou v mieste sedenia

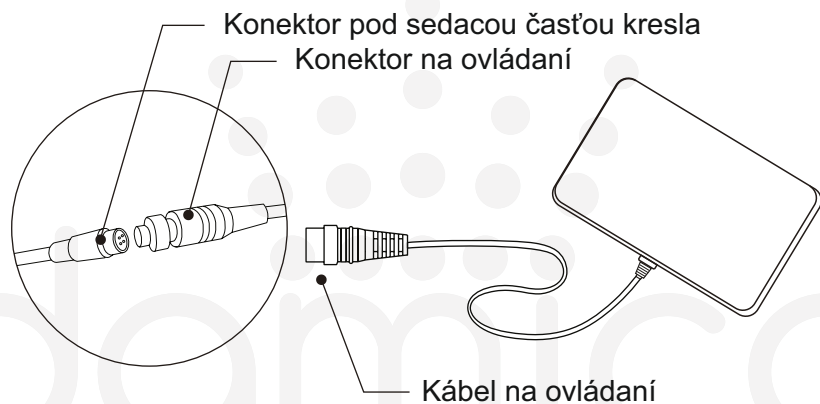

Napájací kábel:

- zapojte napájací kábel do konektoru na kresle, zapnite napájanie.

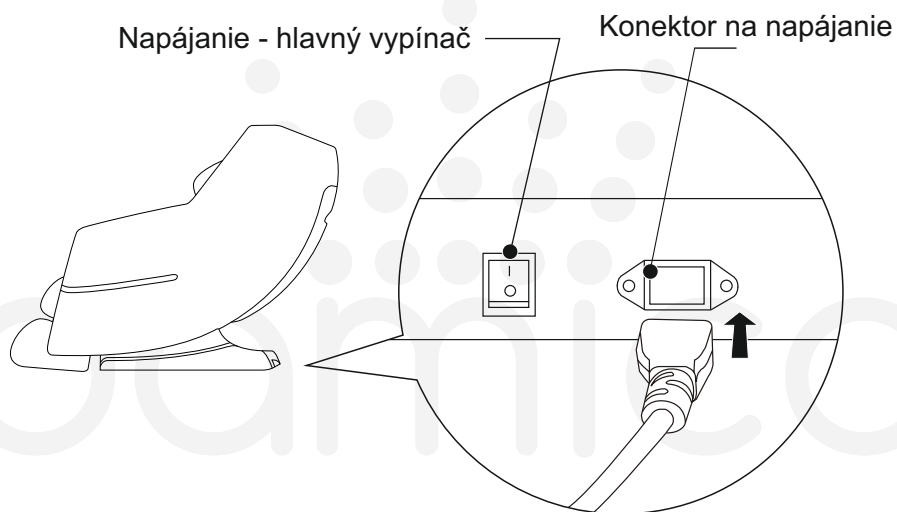

Riešenie problémov

Pozrite si a skontrolujte zoznam možných príčin pri riešení problémov. Ak sa vyskytuje a pretrváva neprirodzené správanie sa kresla, prestaňte zariadenie používať, aby ste zamedzili ďalšiemu poškodeniu. Odpojte zariadenie zo siete a kontaktujte svojho predajcu.

Problém	Možný dôvod / riešenie	
Masážne hlavice idú hore a ostanú stáť.	Po ukončení automatického masážneho programu sa hlavice presunú do najvyššej polohy aby neprekážali po masáži.	Bežný prevádzkový zvuk, nejedná sa o vadu
Hluk počas masáže	<ul style="list-style-type: none">- zvuk poklepávania pri masáži- zvuk trenia masážnych hlavíc o textilné časti- zvuk pohybu masážnych hlavíc pri pohybe- zvuk počas nafukovania vzduchových vankúšov- zvuk počas práce vzduchovej pumpy- zvuk počas vyfukovania vzduchových vankúšov- zvuk počas polohovania masážneho kresla	
Masážne hlavice zostanú stáť počas masáže.	<ul style="list-style-type: none">- sila pôsobiaca na hlavice je príliš vysoká, spôsobené nadmernou záťažou, hlavice prerušia masáž.- pri pohybe hlavíc mierne nadvihnite telo, alebo zmeňte polohu kresla viac do sedacej polohy. (hlavne pri užívateľoch s hmotnosťou nad 100kg dávajte pozor pri používaní, prednostne používajte kreslo v polohe po sediačky pre menšiu záťaž)	Ak po prekontrolovaní všetkých možných dôvodov kreslo stále nepracuje správne, prestaňte ho okamžite používať.
Po stlačení vypínača na masážnom kresle nezačne pracovať, alebo sa ani nezapne..	<ul style="list-style-type: none">- Prosím skontrolujte nasledovné:<ol style="list-style-type: none">1. Je správne pripojený napájací kábel?2. Je zadný hlavný vypínač zapnutý - poloha ON?	
Napájací kábel, alebo napájací konektor sa prehrieva	<ul style="list-style-type: none">- KRESLO IHNEĎ PRESTAŇTE POUŽÍVAŤ!	
	<ul style="list-style-type: none">- Kontaktujte svojho dodávateľa a popíšte mu závalu	
	<ul style="list-style-type: none">- Nerozoberajte a neopravujte kreslo bez predošlej komunikácie s predajcom, ktorý určí ďalší postup.	

Čistenie a údržba


Spôsob čistenia

Prosím dodržujte nasledovné inštrukcie pri čistení povrchov na kresle

- uistite sa, že zariadenie je vypnuté a odpojené od napájacej siete
- na čistenie použite jemnú mikrovláknovú utierku namočenú vo vlažnej vode
- mierne vlhkou utierkou očistite povrchy, z utierky nesmie tiecť a kvapkať voda
- povrch môžete následne vysušiť jemnou suchou utierkou

POZOR!


- nepoužívajte alkoholové, benzínové ani iné chemické čistiace prostriedky
- nesušte povrch fénom ani iným teplovzdušným zariadením
- nežehlite žiadny povrch kresla
- pri údržbe vždy odpojte zariadenie z elektrickej siete
- použite ochranný obal proti prachu ak kreslo dlhodobo nevyužívate
- dávajte pozor na riflovinu a farebné oblečenie, ktoré môže zanechať zafarbenie na povrchu kresla, vyvarujte sa takémuto oblečeniu
- pri nadmernom znečistení utrite produkt jemnou hubkou namočenou v slabom saponáte, najskôr vyskúšajte na malom kúsku na menej viditeľnom mieste.
- Voda na čistenie nesmie mať viac ako 40 stupňov

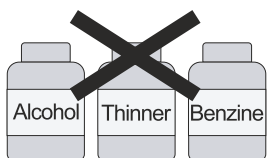

Nepoužívajte čistiace prostriedky.



Teplota vody na čistenie nesmie prekročiť 40 stupňov.

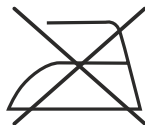

Nežehlite žiadnu časť ani povrch.

Dovozca pre SR a ČR:
Damico s.r.o.
Zavarská 11G
91701 Trnava



www.damico.sk, www.damico.cz
www.masaznekresla.com

informácie o produktoch: info@damico.sk

servis a náhradné diely: servis@damico.sk

Špecifikácia

Model	Damico Sento
Menovité napätie	100-240V~
Menovitá frekvencia	50-60Hz
Menovitý príkon	120W
Rozmer horná poloha	1470(L)x750(W)x1100(H)mm
Rozmer dolná poloha	1701(L)x750(W)x906(H)mm

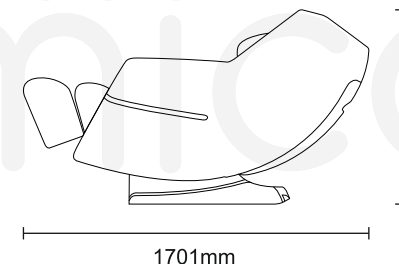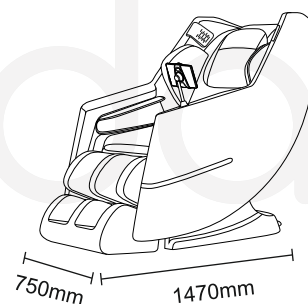

damico